


異なるサンプル量での溶出パターン

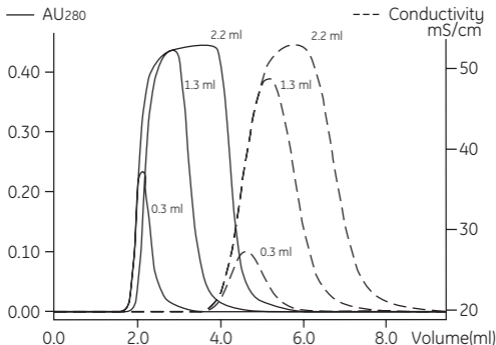

カラム: HiTrap Desalting

サンプル: 2 mg/ml bovine serum albumin in 50 mM リン酸
ナトリウム, 0.5 M NaCl, pH 7.0

サンプル量: 0.3 ml, 1.3 ml, 2.2 ml

溶出液: 50 mM リン酸ナトリウム, 0.15 M NaCl, pH 7.0

流速: 5 ml/min

検出: UV (280 nm, 5 mm cell) and conductivity

サンプル添加: シリンジ